



membraPure GmbH
Wolfgang-Küntscher-Straße 14
16761 Hennigsdorf

Fertigungsunterlagen

Fluidikplan miniTOC² PRO

Zusammenfassung:

Aktueller Fluidikplan des miniTOC² PRO 2 Pumpen

Ersteller:	TH
Abteilung:	Entwicklung
Erstelldatum:	16/08/2022
letzte Änderung durch:	FH
Änderungsdatum:	17/02/2025


1 Information

Das Dokument beinhaltet den Fluidikplan für den Aufbau des miniTOC² in der Variante PRO mit der Option 2 Pumpen zum Stand des 17/02/2025. Weitere Änderungen können Folgen.


Unter den Bildern ist in einer Textbox verdeutlicht wie der aktuelle Proben-schlauch beschriftet ist. Die Beschriftung bitte beibehalten.

Als Beschriftung soll die entsprechende Schlauchnummer verwendet werden. Für diese Beschriftungen gibt es eine Druckvorlage die dann mithilfe des CAB-EOS-Labeldruckers auf Schrumpfschläuchen ausgedruckt werden kann.

2 Vorlage

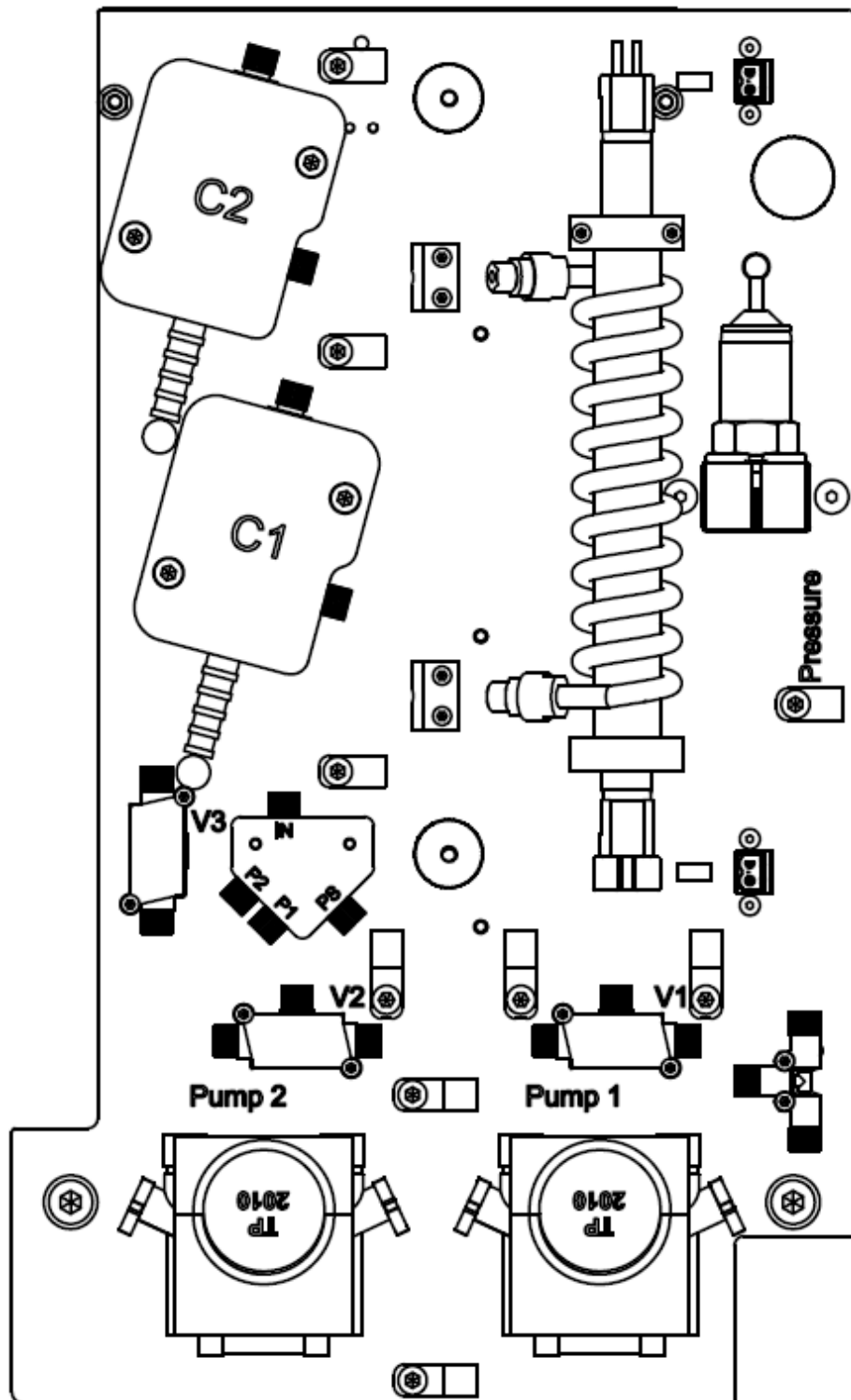


3 Fluidikplan

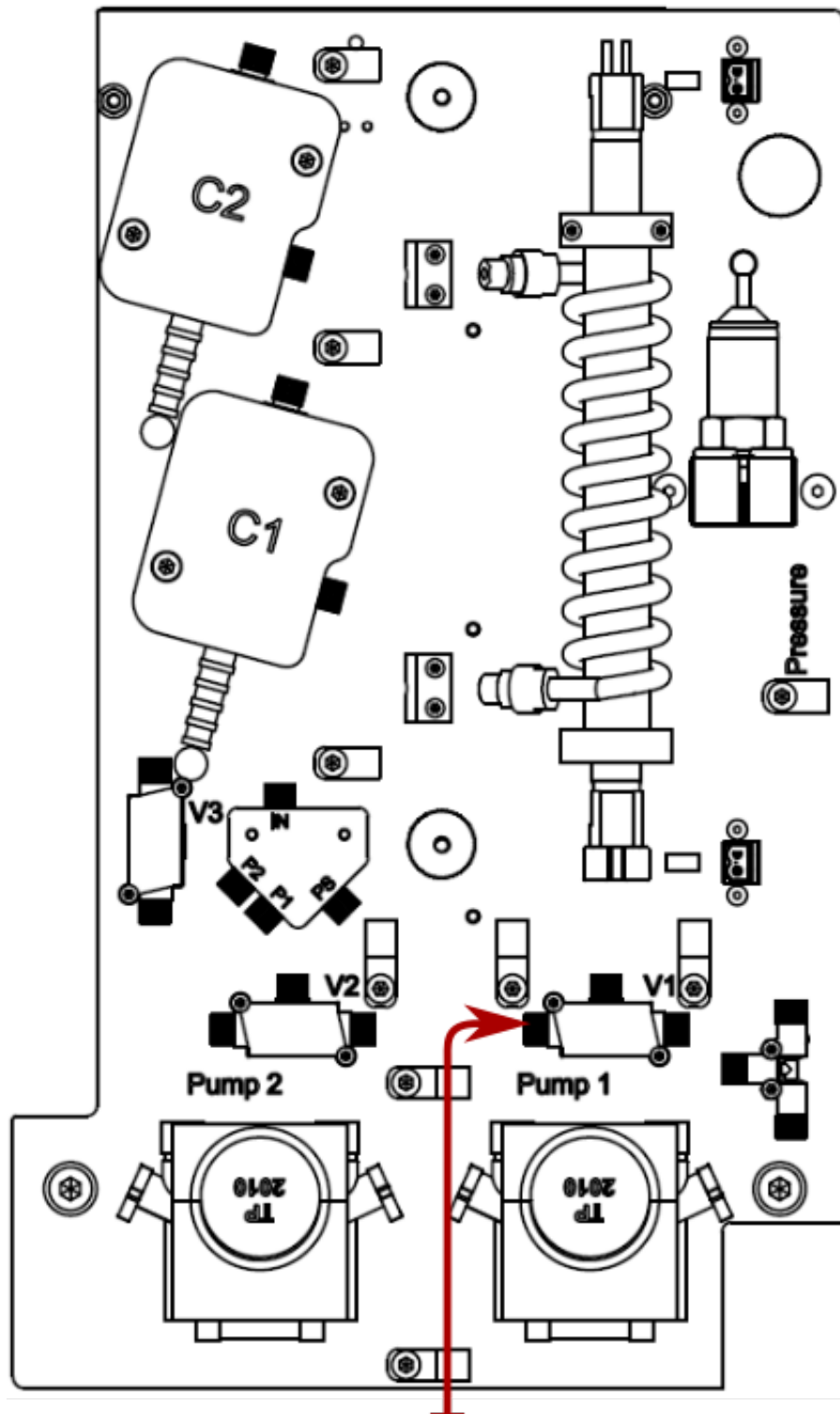


1.0030 Port 1 → V1

Länge: 45 cm

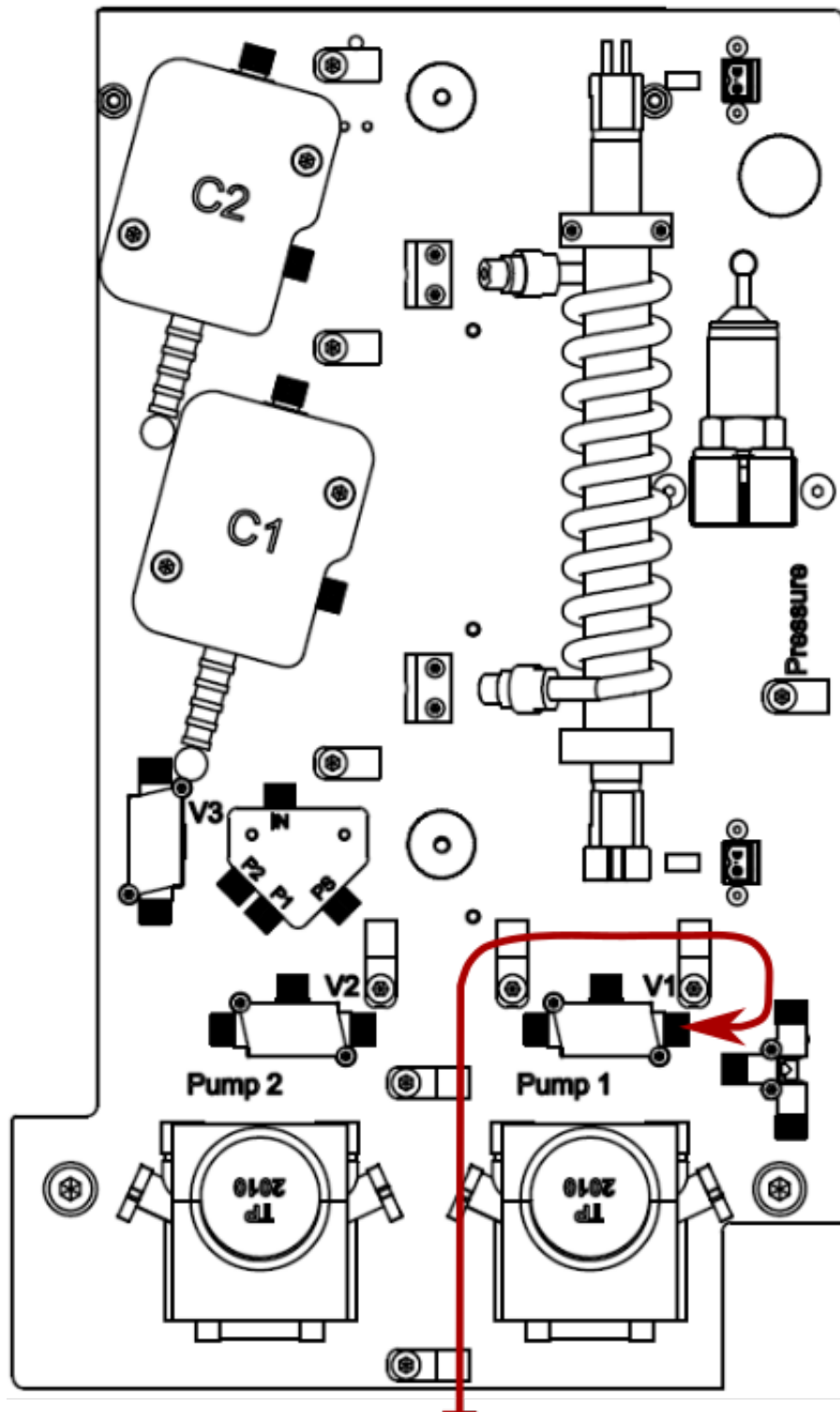


1.0031 Port 2 → V1

Länge: 62 cm

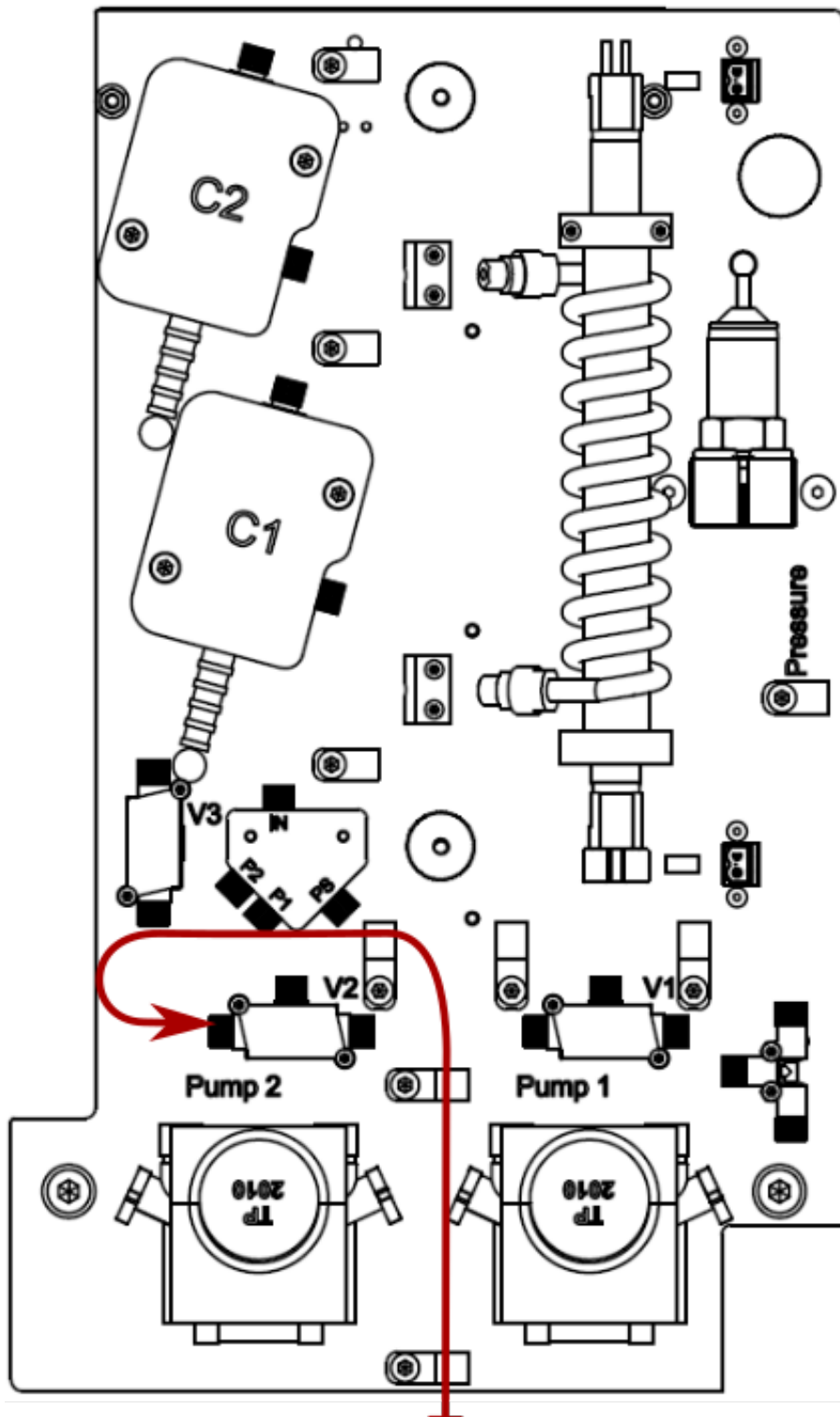


1.0032 Port 3 → V2

Länge: 58 cm

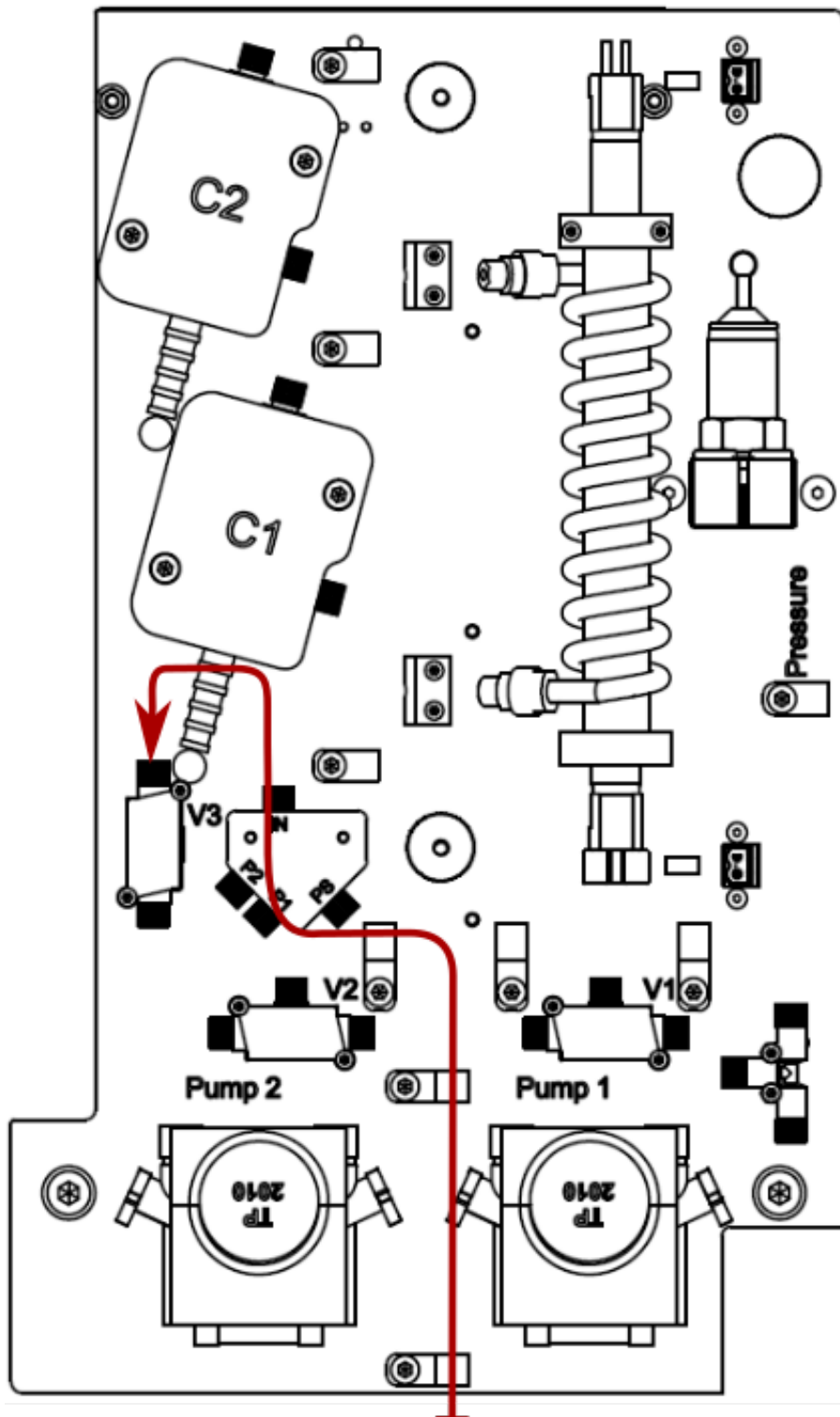


1.0033 Port 4 → V3

Länge: 62,5 cm

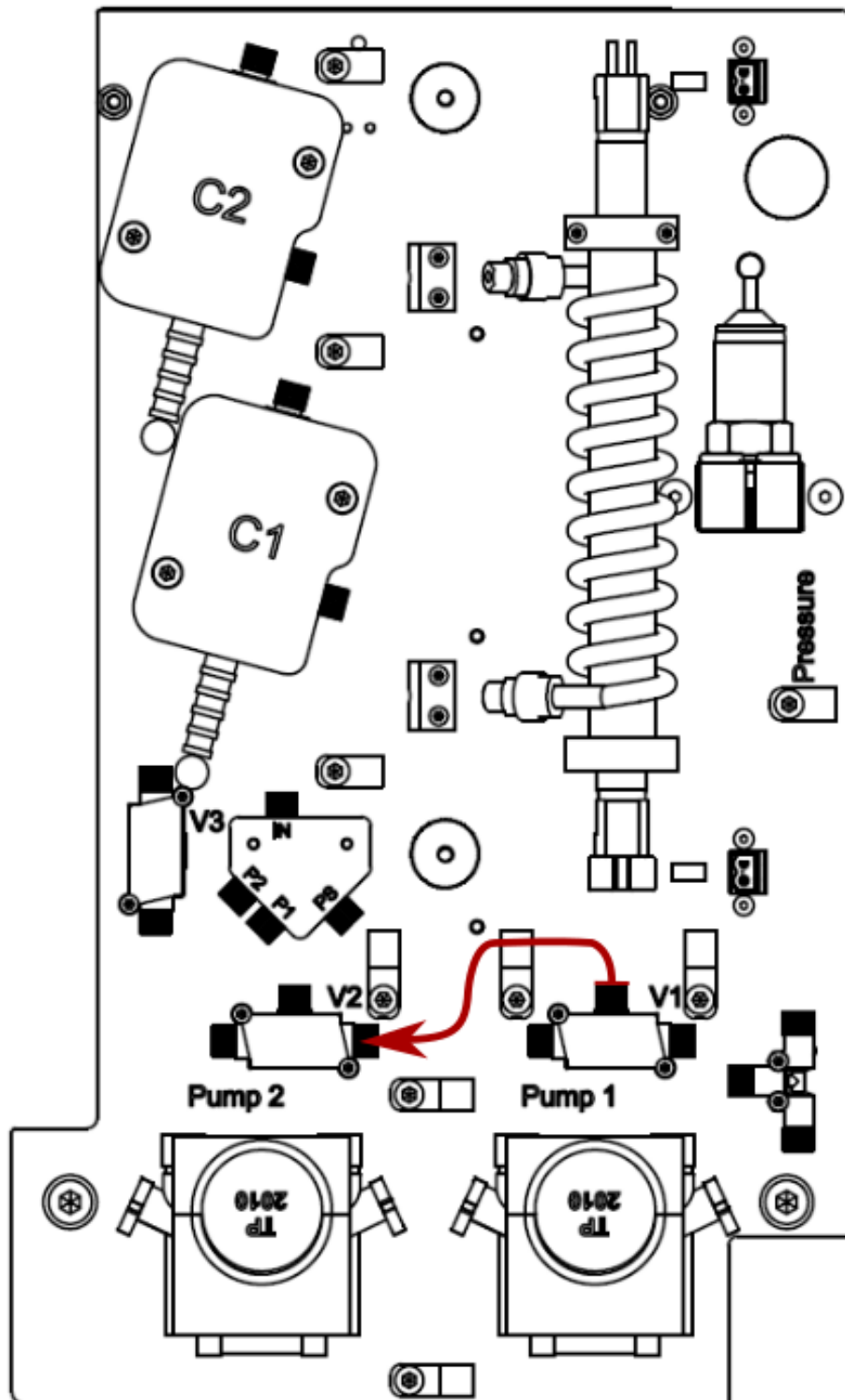


1.0034 V1 → V2

Länge: 13,5 cm

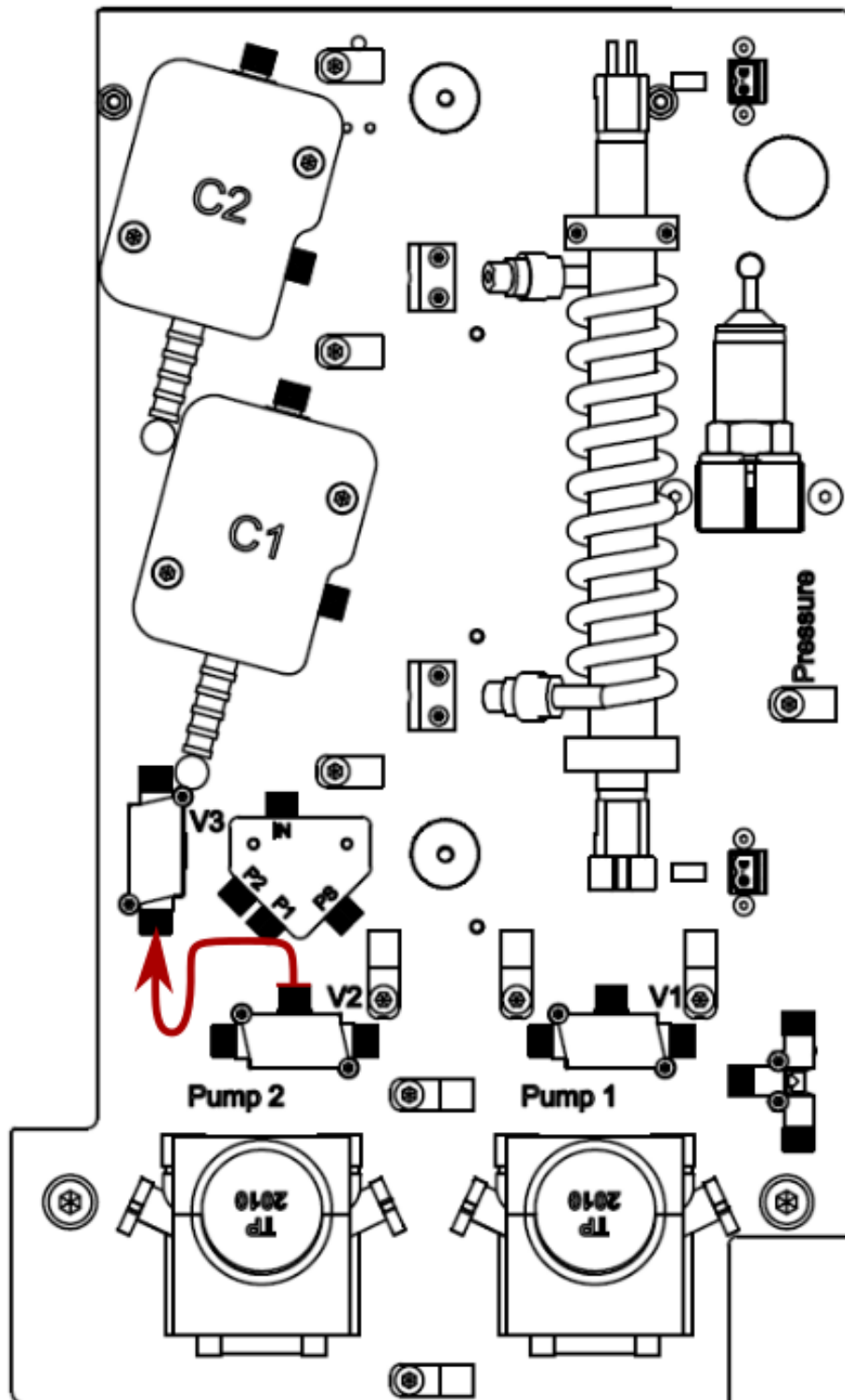

1.0035 V2 → V3


Länge: 17 cm

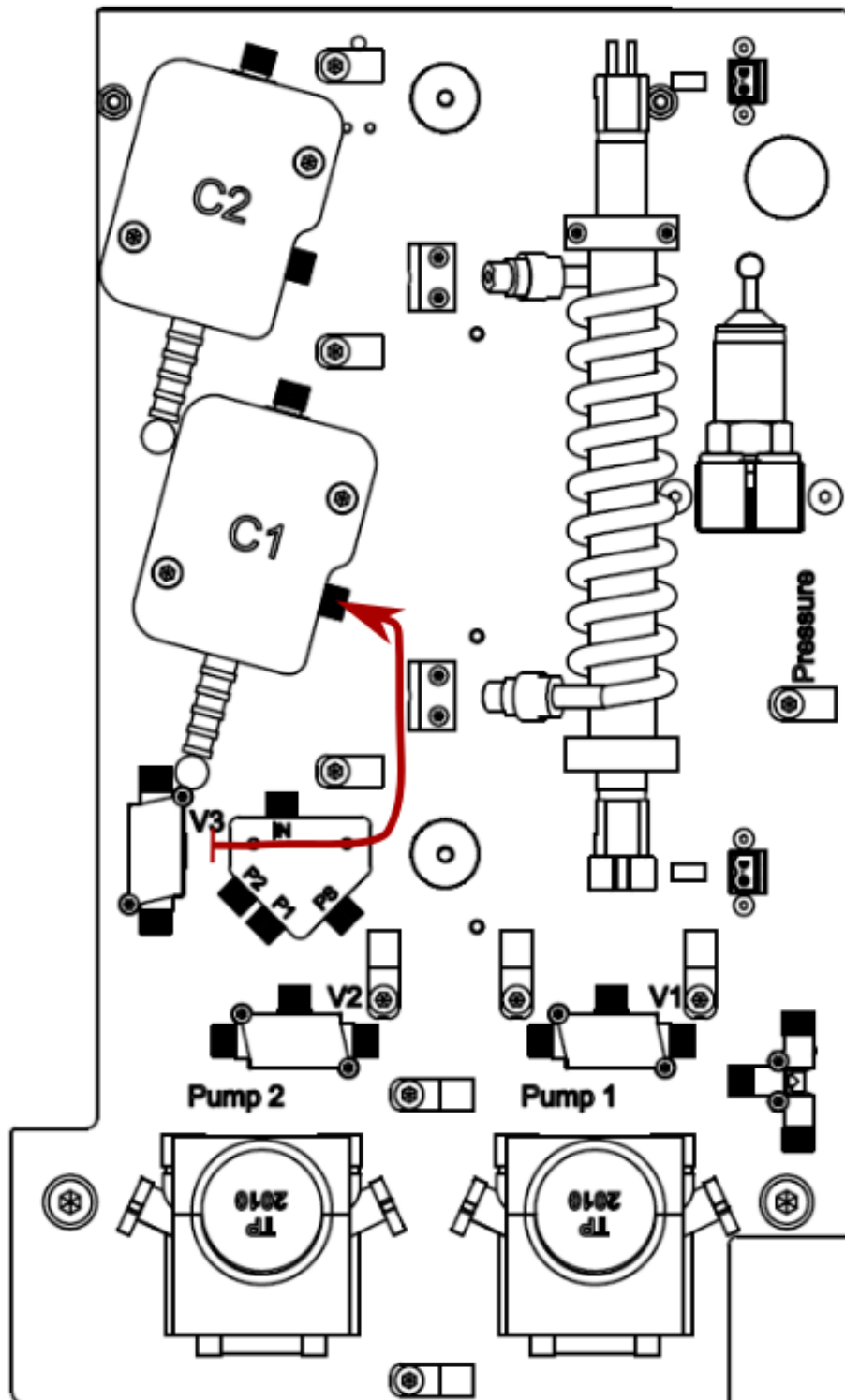

1.0036 V3 → Cond.1


Länge: 17 cm



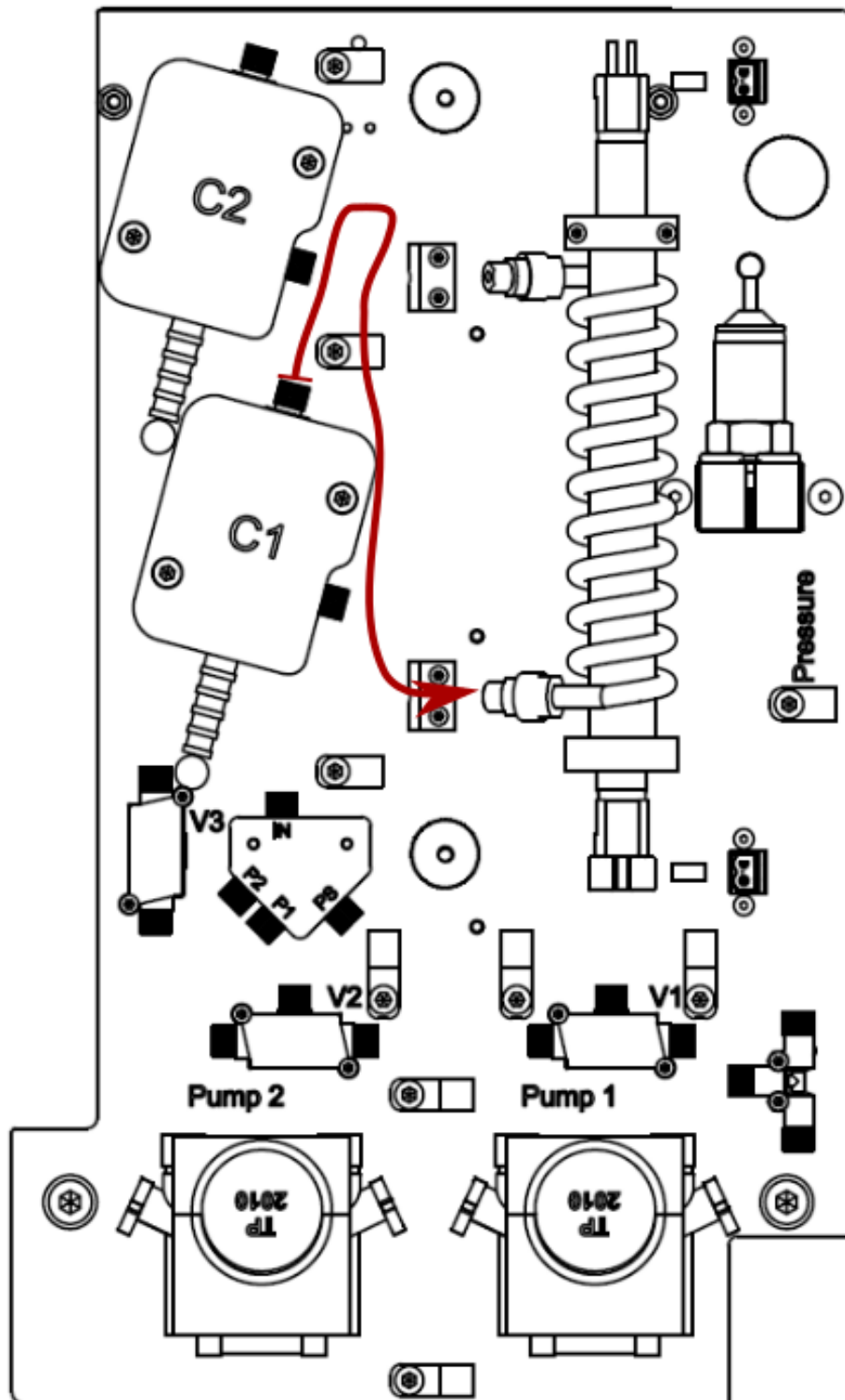


1.0039 Cond.1 → UV

Länge: 22,5 cm

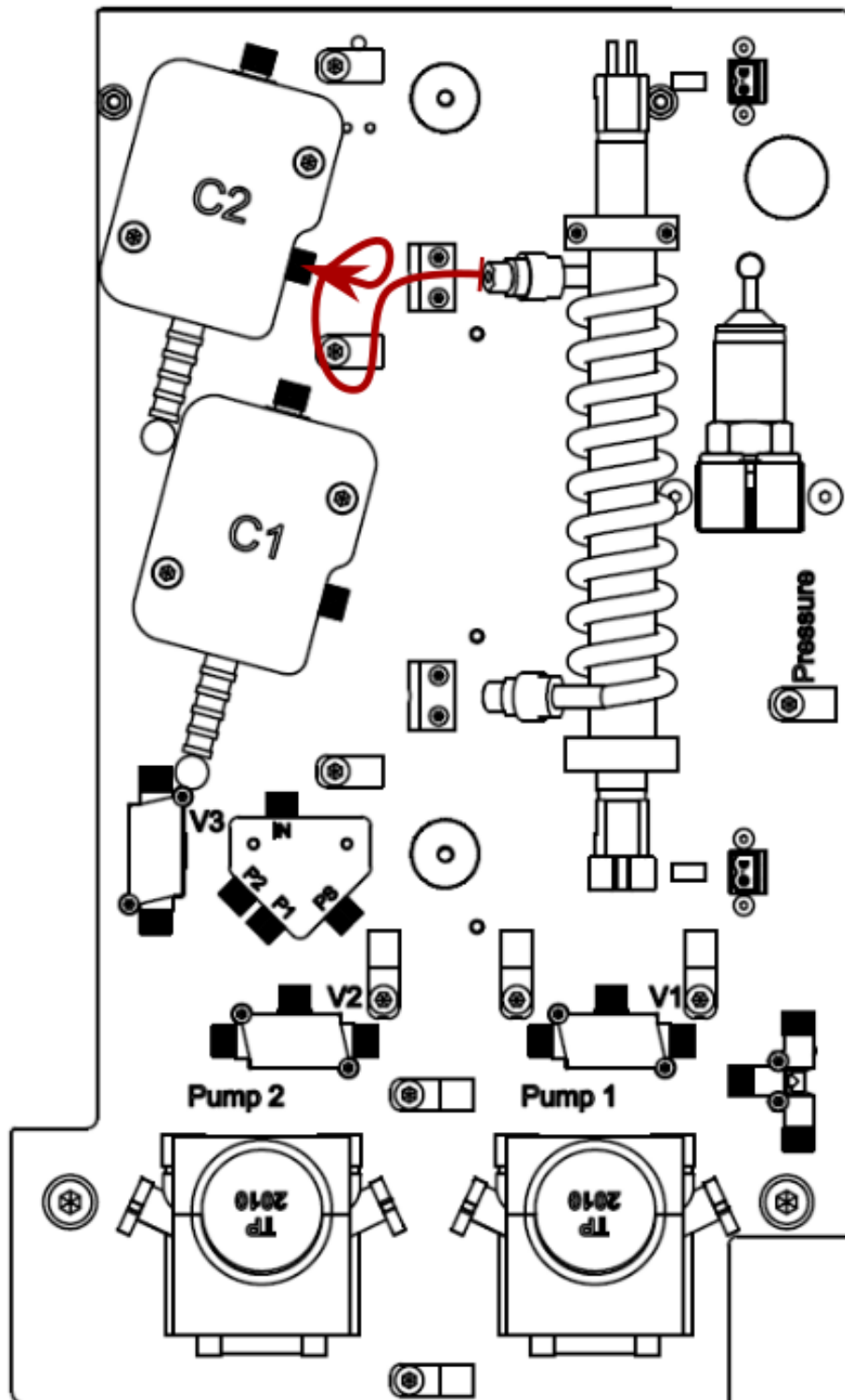


1.0040 UV → Cond.2

Länge: 22,5 cm

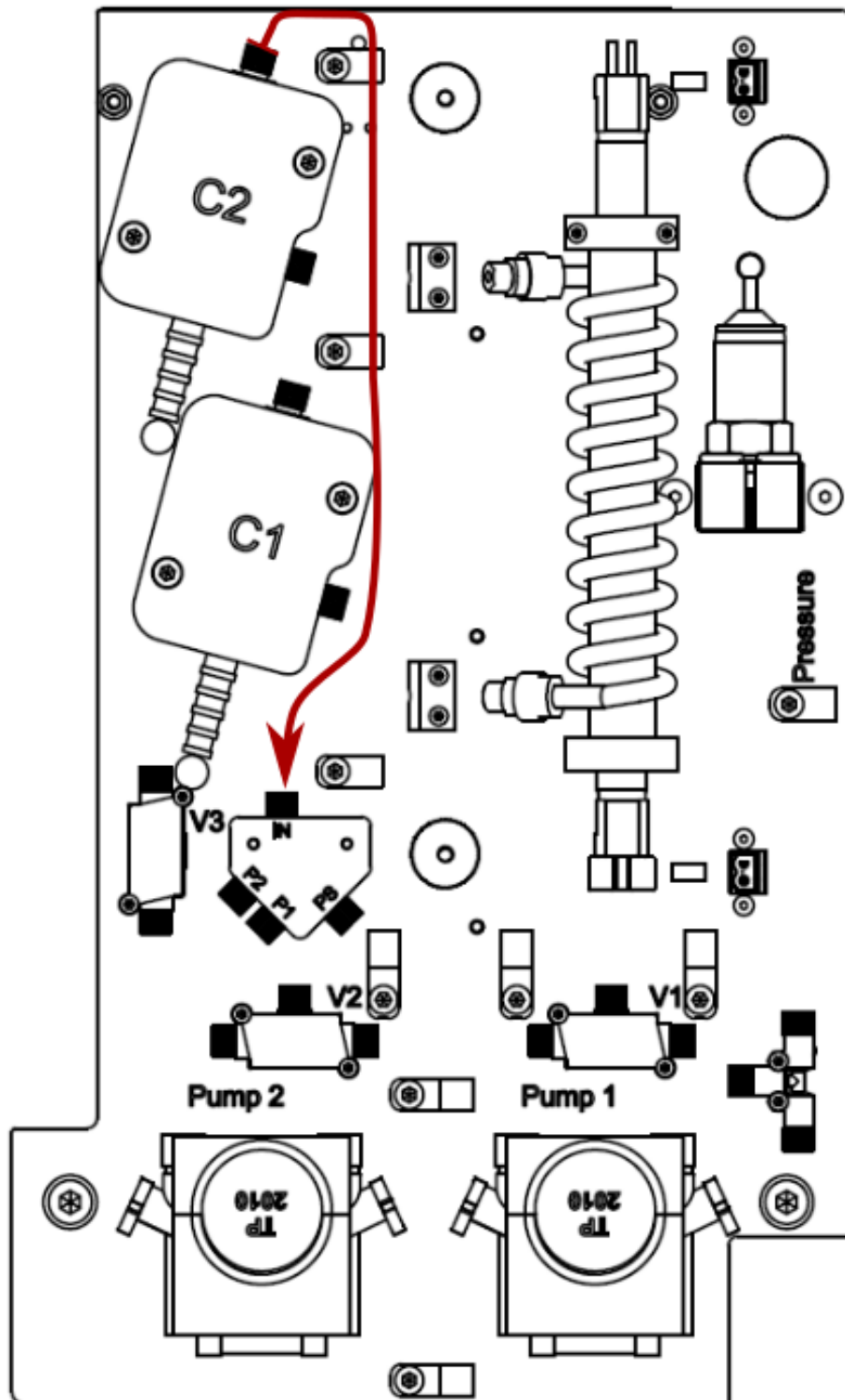


1.0041 Cond.2 → X

Länge: 32,5 cm

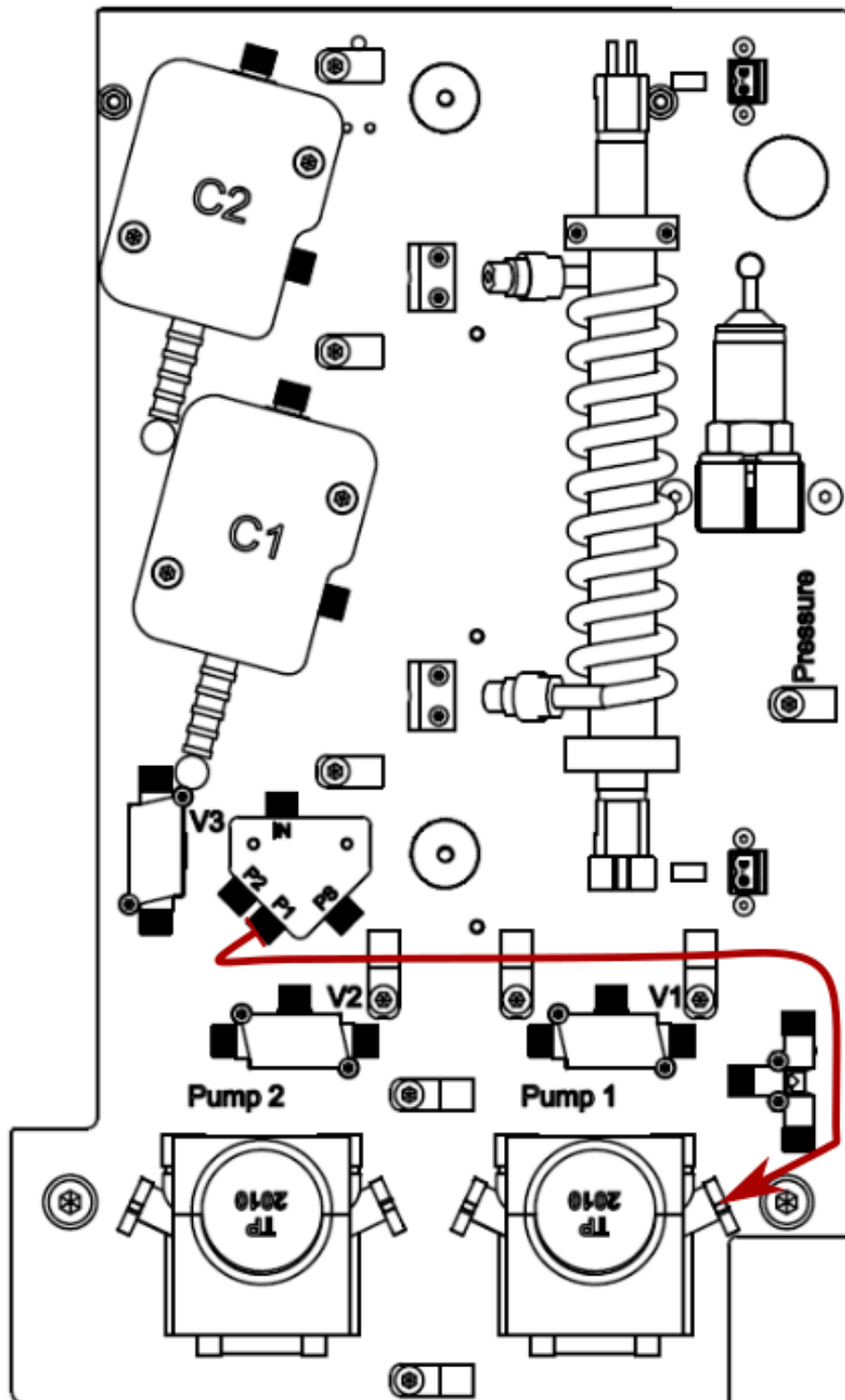


1.0042 X → Pump 1

Länge: 29,5 cm

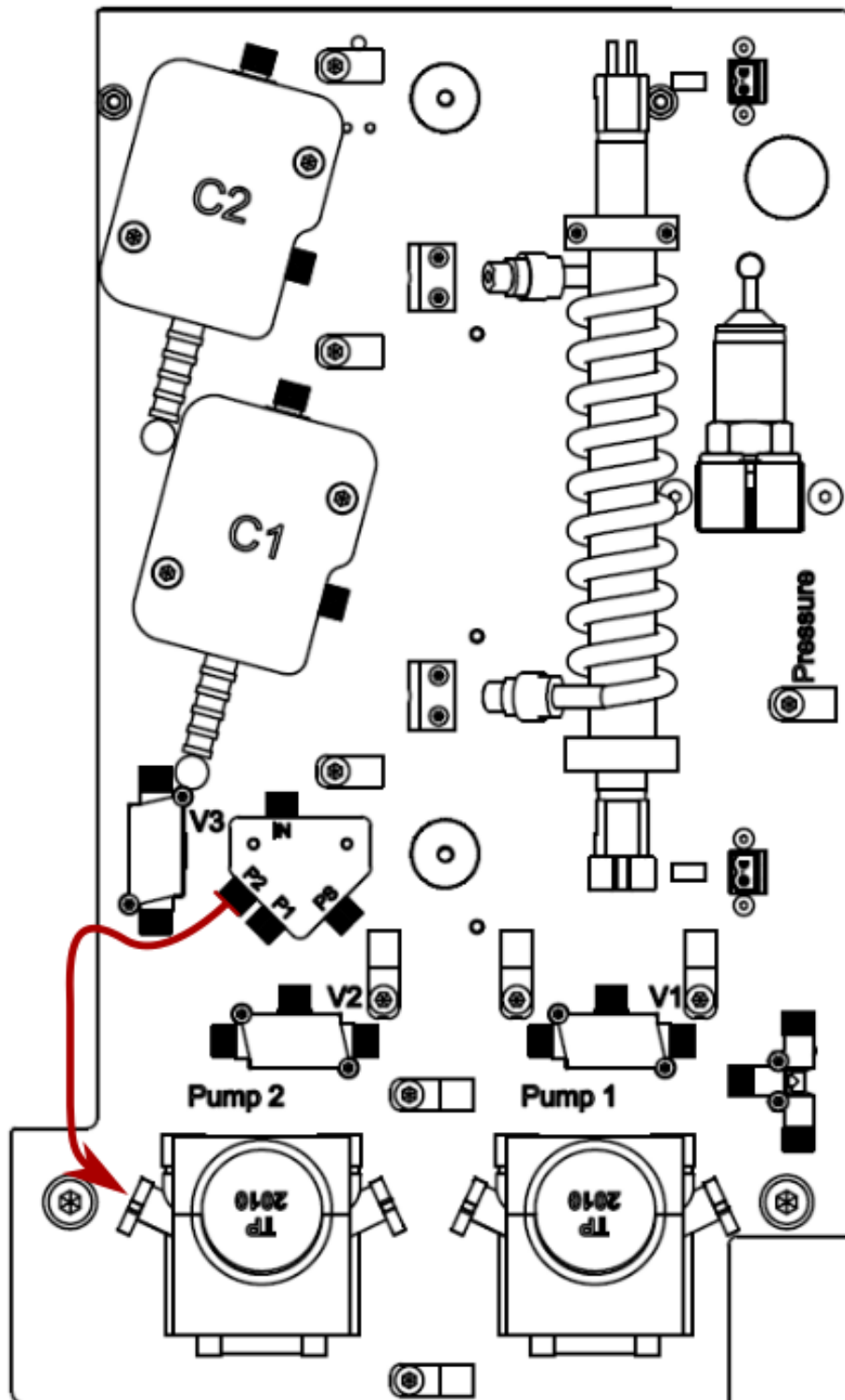


1.0043 X → Pump 2

Länge: 11 cm

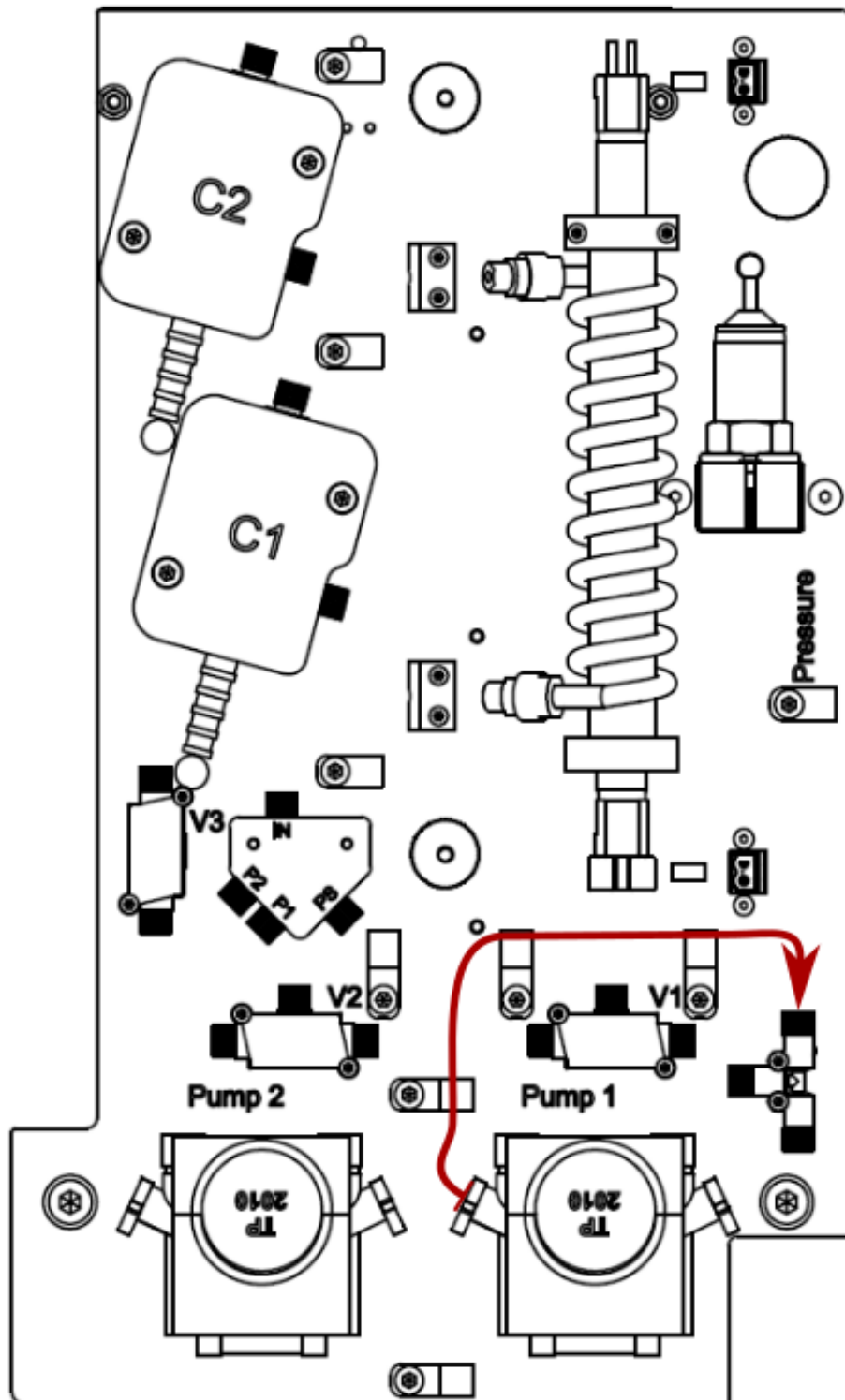


1.0044 Pump 1 → T

Länge: 18,5 cm

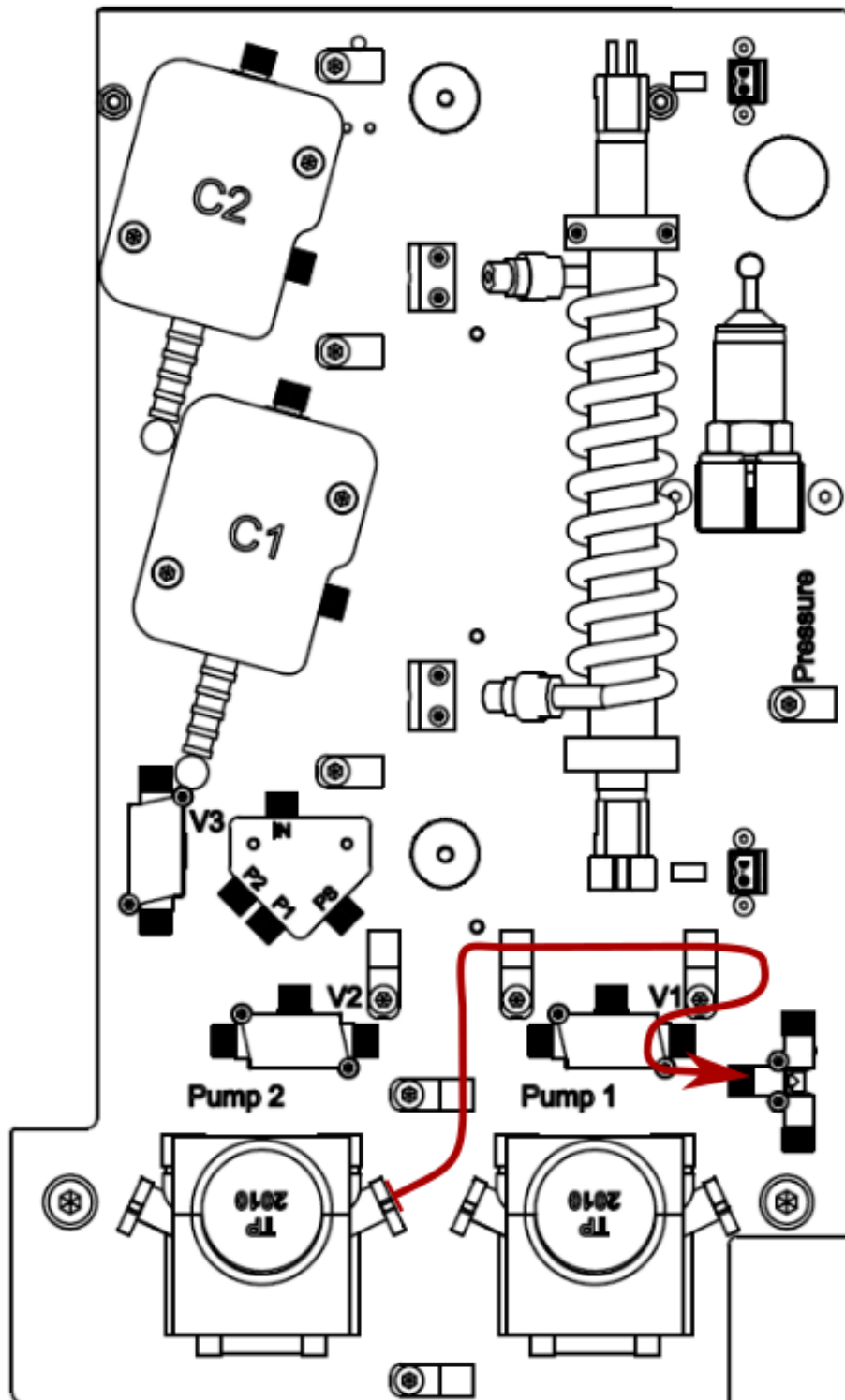

1.0045 Pump 2 → T

Länge: 24,5 cm

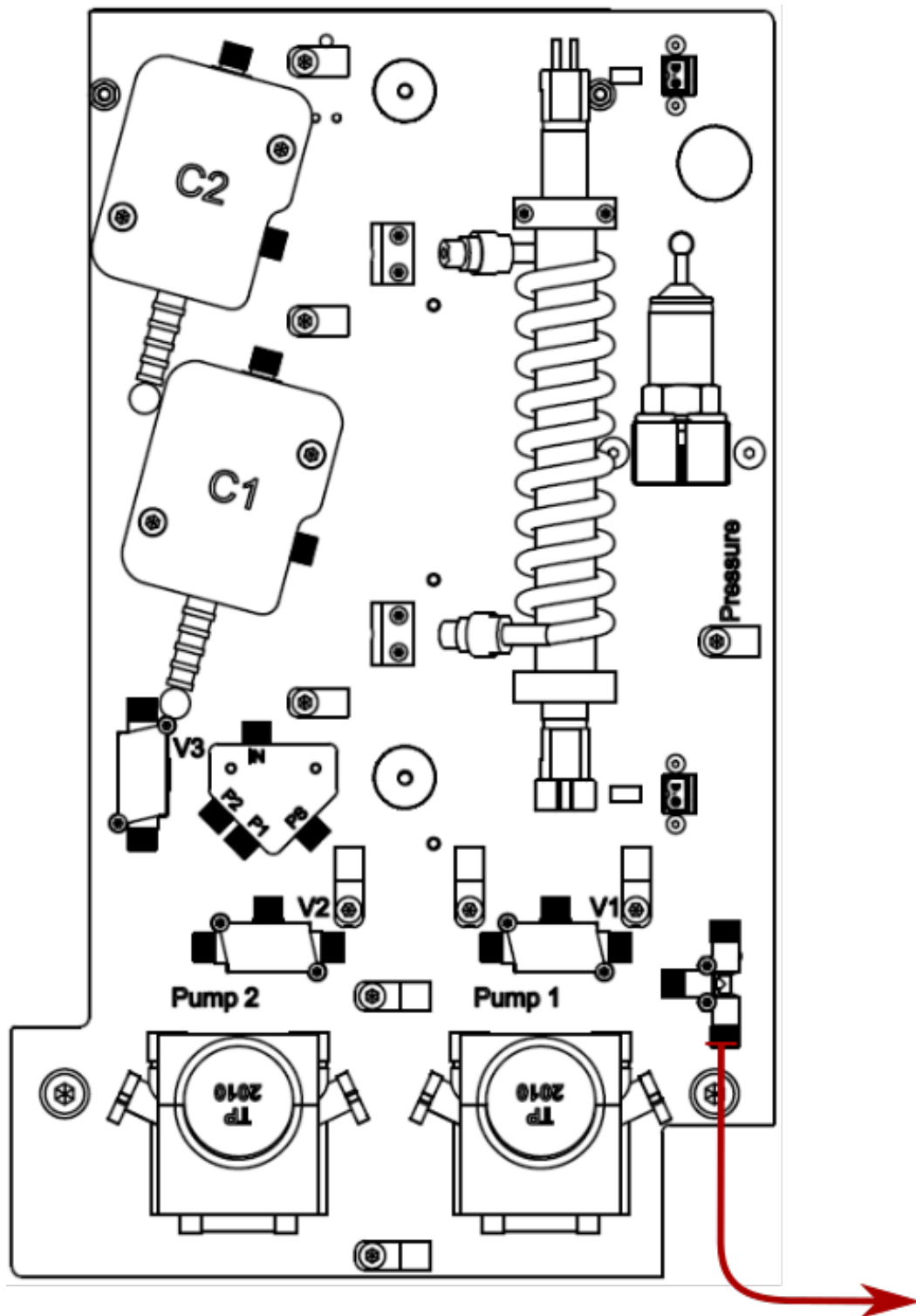

1.0046 T → Waste

Länge: 50 cm