



membraPure GmbH
Wolfgang-Küntschers-Straße 14
16761 Hennigsdorf

Fertigungsunterlagen

Fluidikplan miniTOC² basic

Zusammenfassung:

Aktueller Fluidikplan des miniTOC² basic 2 Pumpen

Ersteller:	TH
Abteilung:	Entwicklung
Erstelldatum:	16/08/2022
letzte Änderung durch:	FH
Änderungsdatum:	17/02/2025


1 Information

Das Dokument beinhaltet den Fluidikplan für den Aufbau des miniTOC² in der Variante basic mit der Option 2 Pumpen zum Stand des 17/02/2025. Weitere Änderungen können Folgen.


Unter den Bildern ist in einer Textbox verdeutlicht wie der aktuelle Probenschlauch beschriftet ist. Die Beschriftung bitte beibehalten.

Als Beschriftung soll die entsprechende Schlauchnummer verwendet werden. Für diese Beschriftungen gibt es eine Druckvorlage die dann mithilfe des CAB-EOS-Labeldruckers auf Schrumpfschläuchen ausgedruckt werden kann.

2 Vorlage

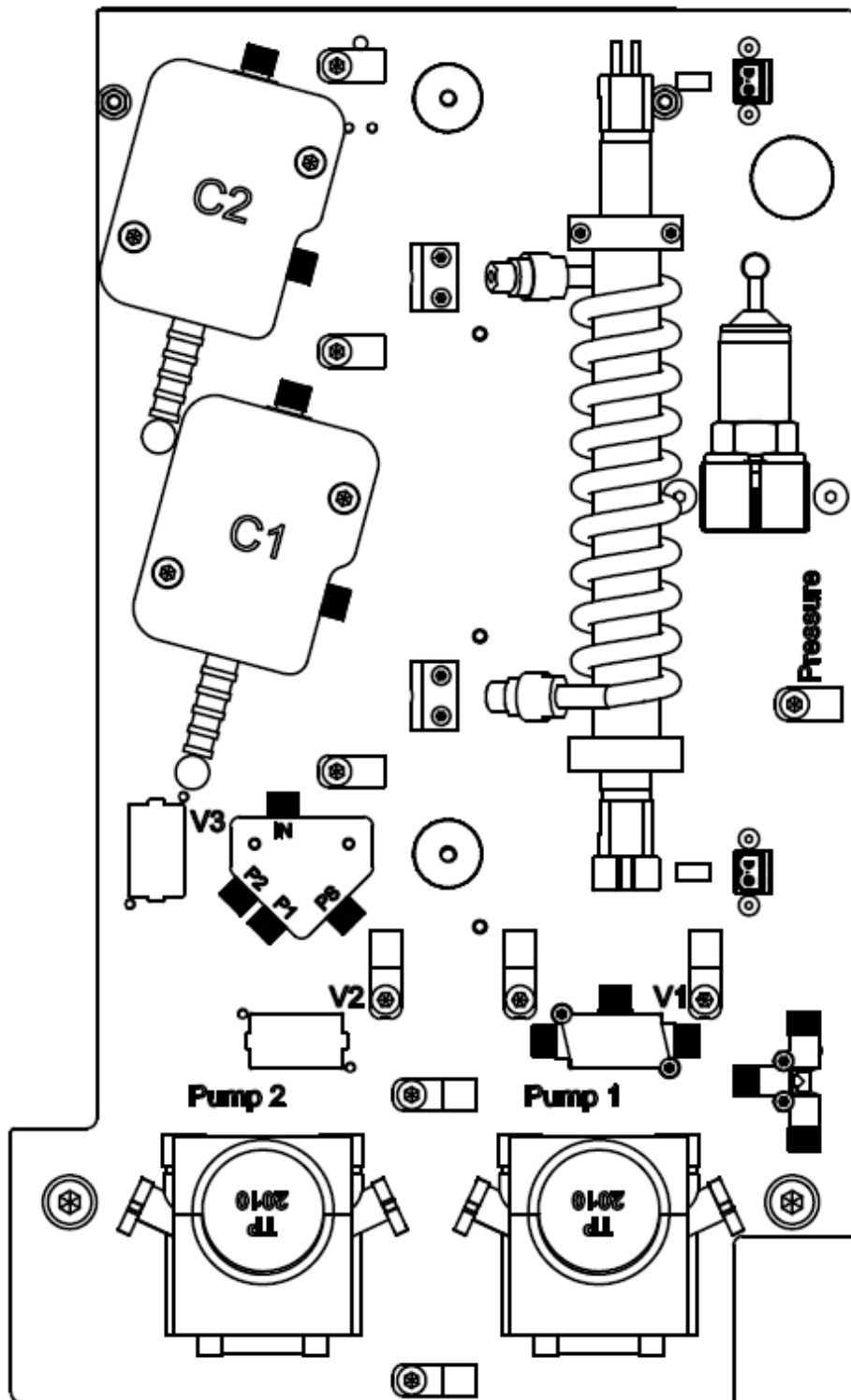


3 Fluidikplan

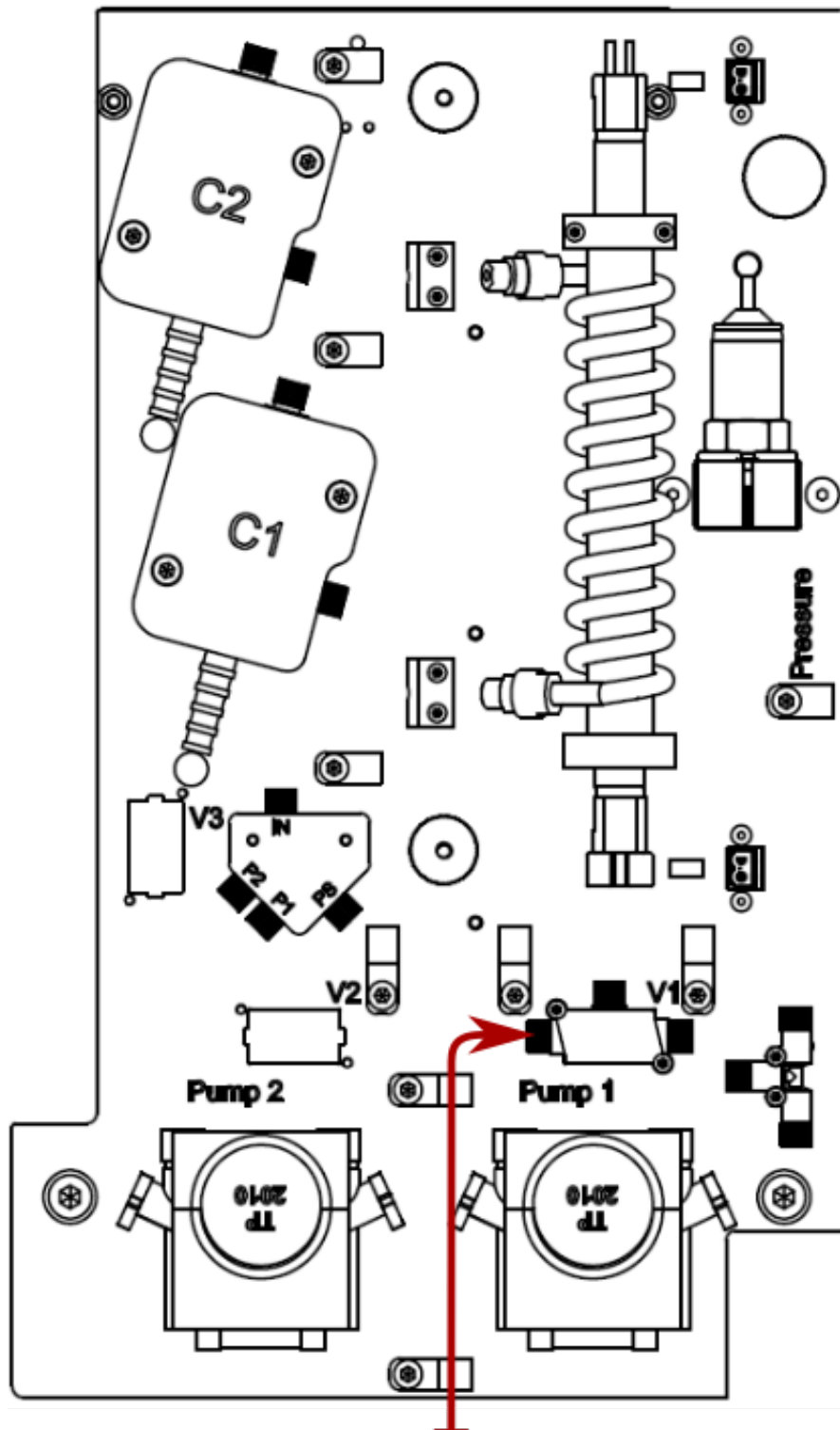


1.0030 Port 1 → V1

Länge: 45 cm

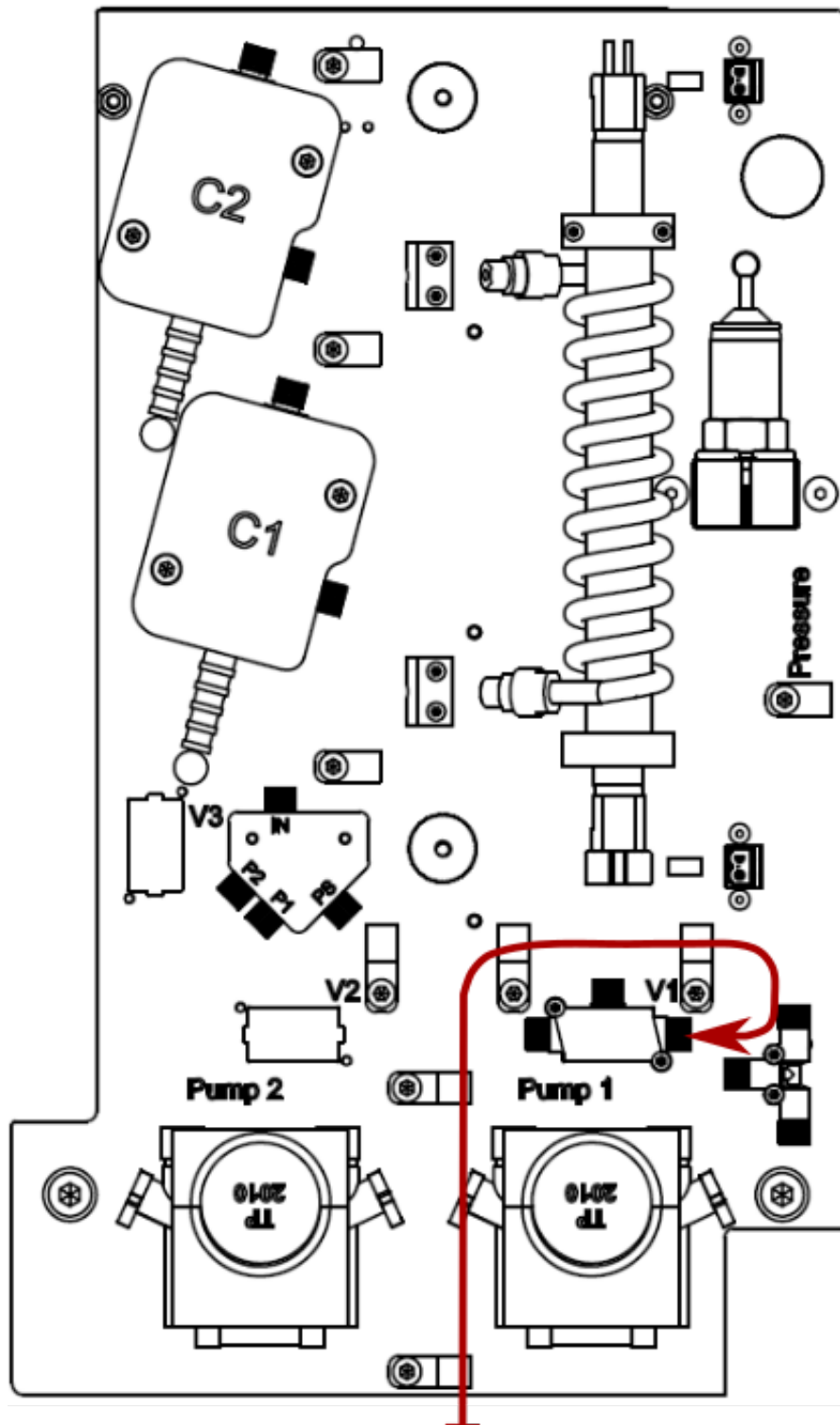

1.0031 Port 2 → V1


Länge: 62 cm

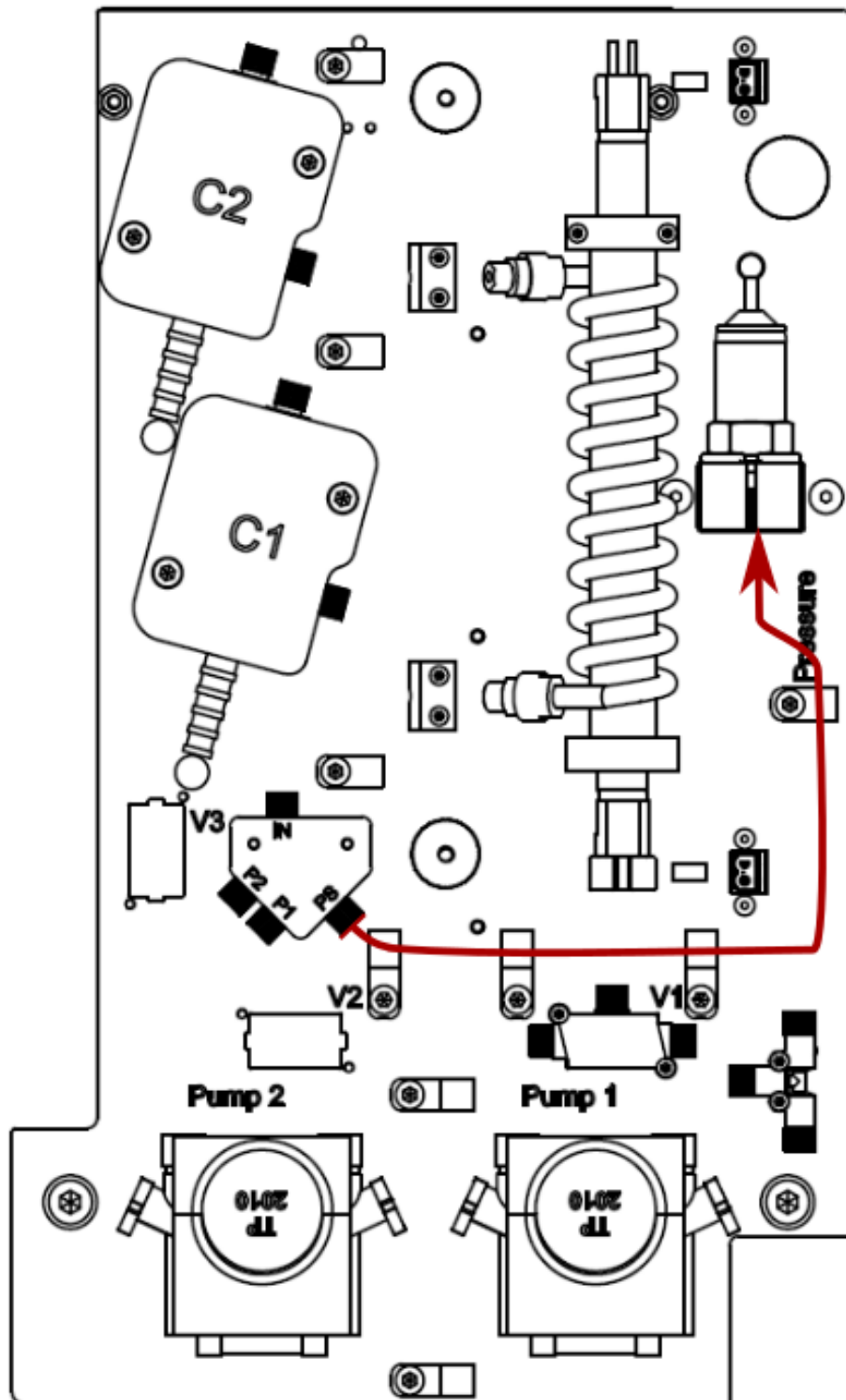

1.0037 X → Pressure


nur wenn Opt. Drucksensor

Länge: 37 cm

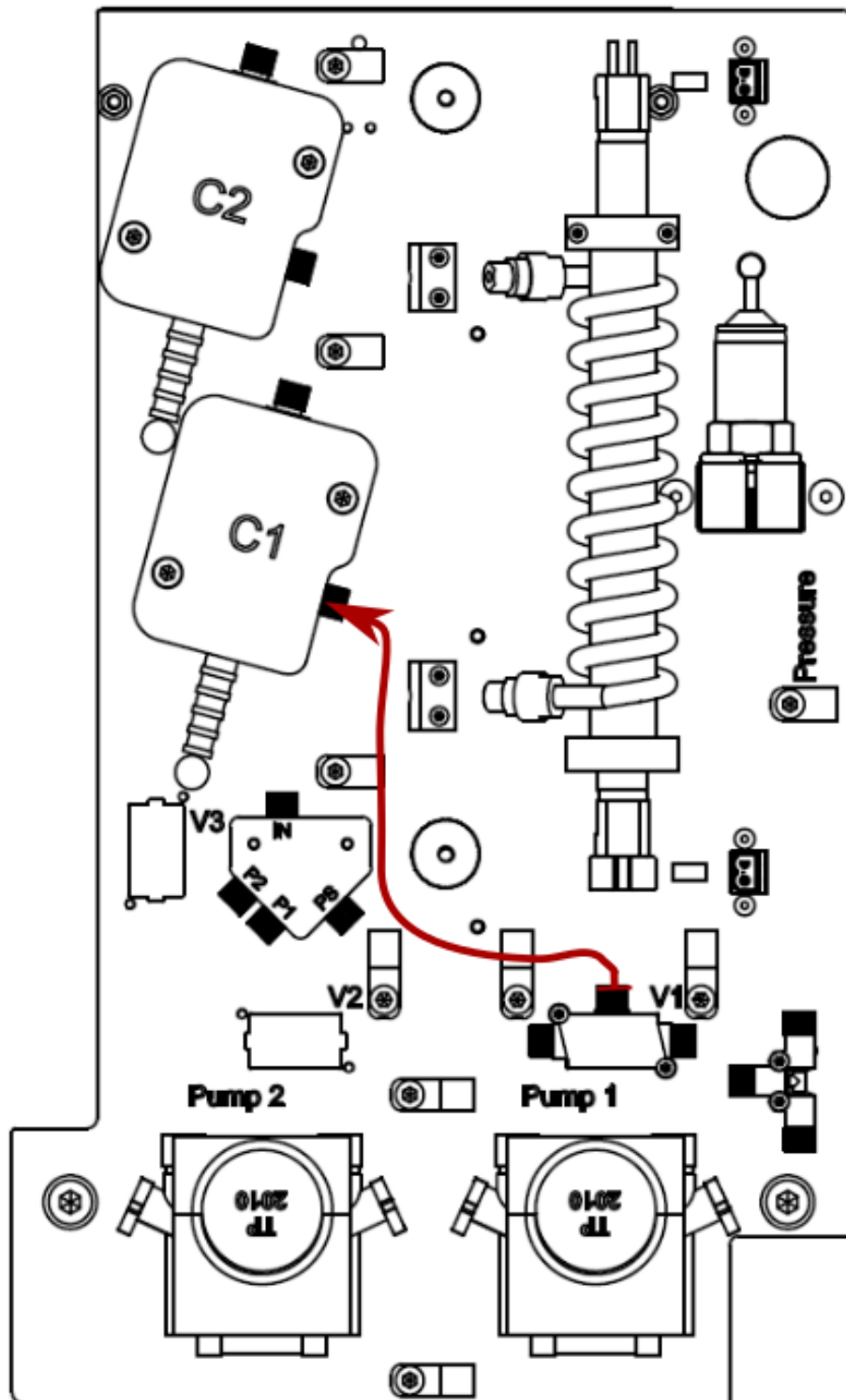


1.0038 V1 → Cond.1


Länge: 23 cm

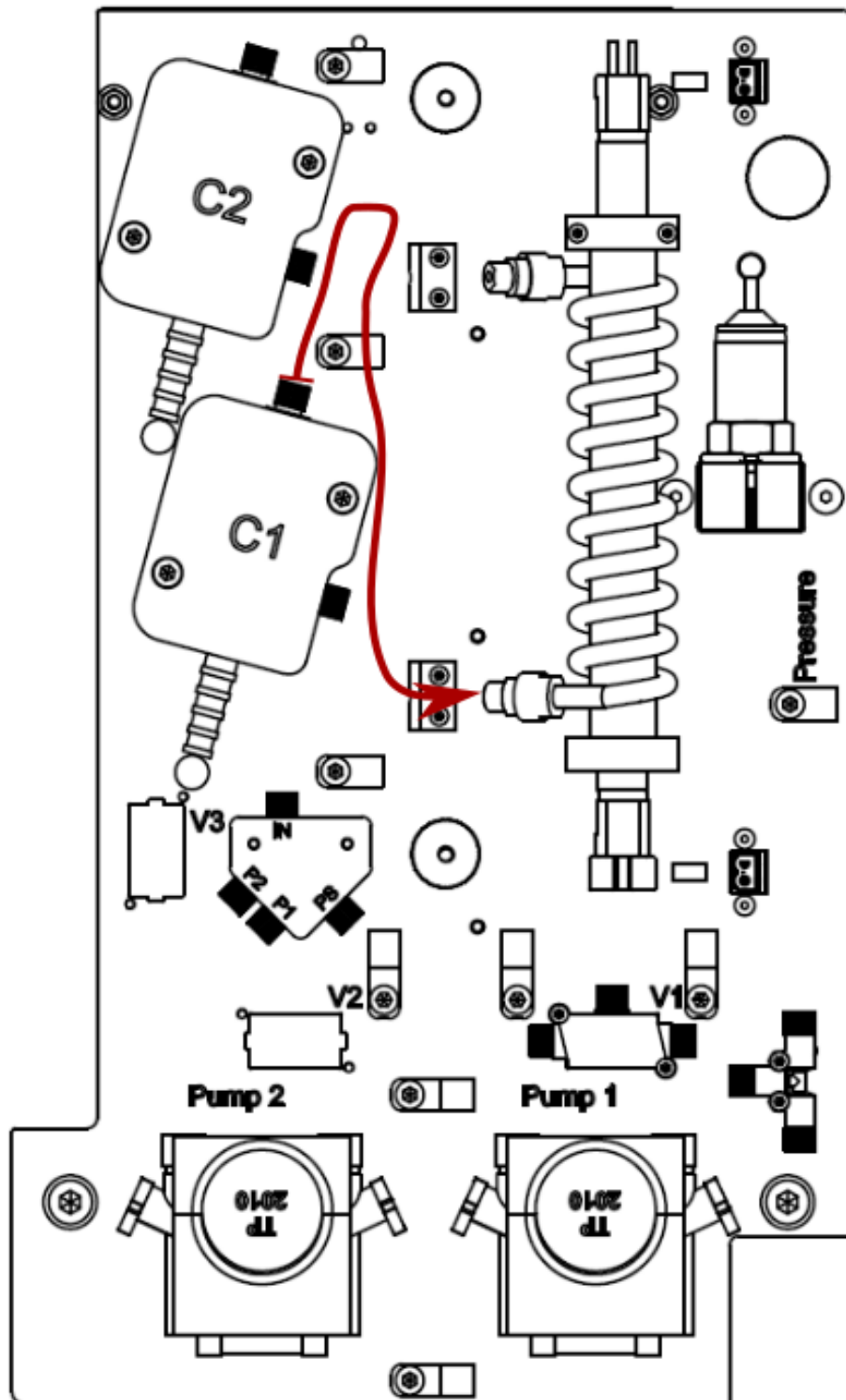

1.0039 Cond.1 → UV


Länge: 22,5 cm

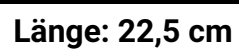

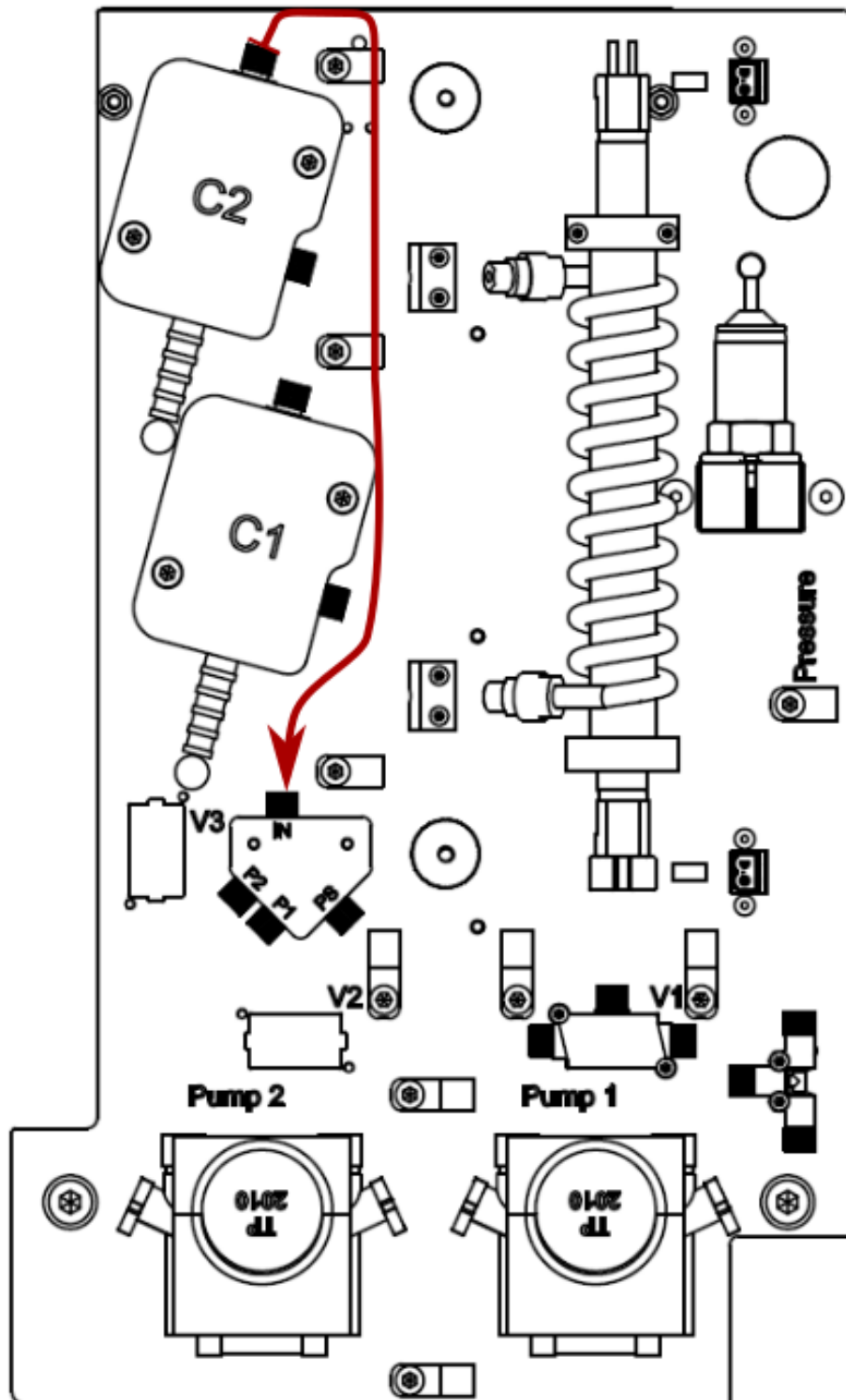


1.0041 Cond.2 → X

Länge: 32,5 cm

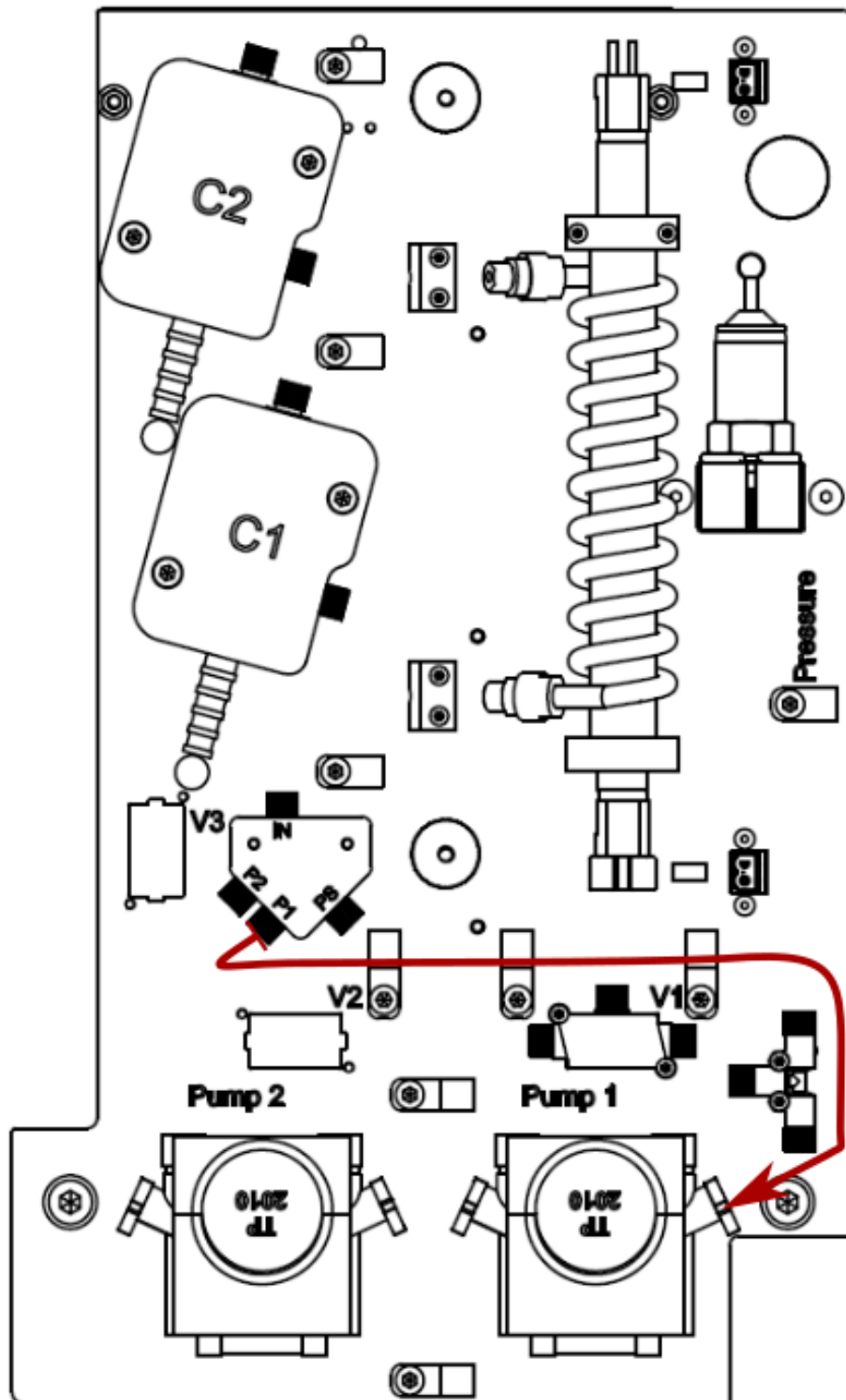

1.0042 X → Pump 1


Länge: 29,5 cm

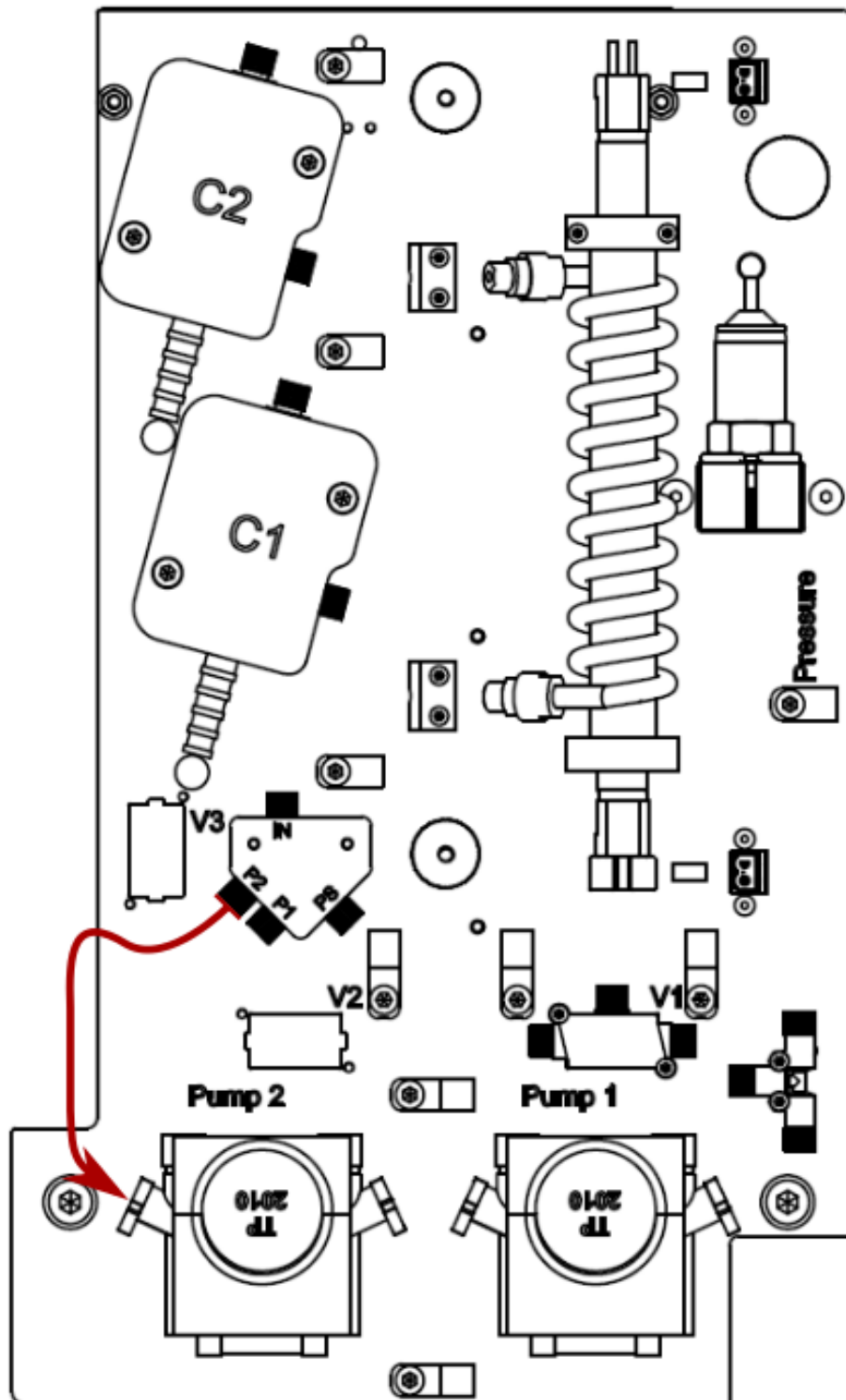

1.0043 X → Pump 2


Länge: 11 cm



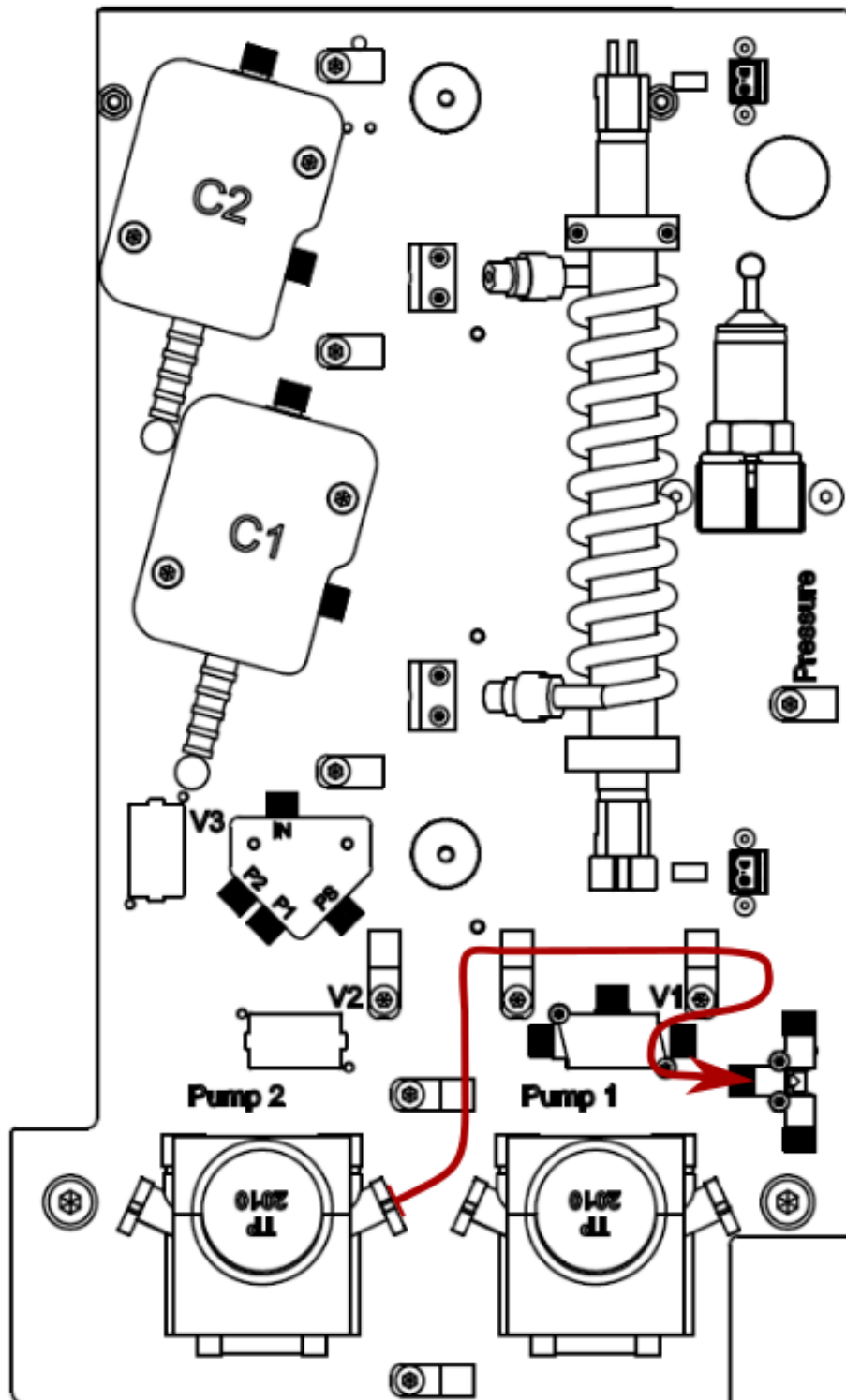

1.0045 Pump 2 → T

Länge: 24,5 cm

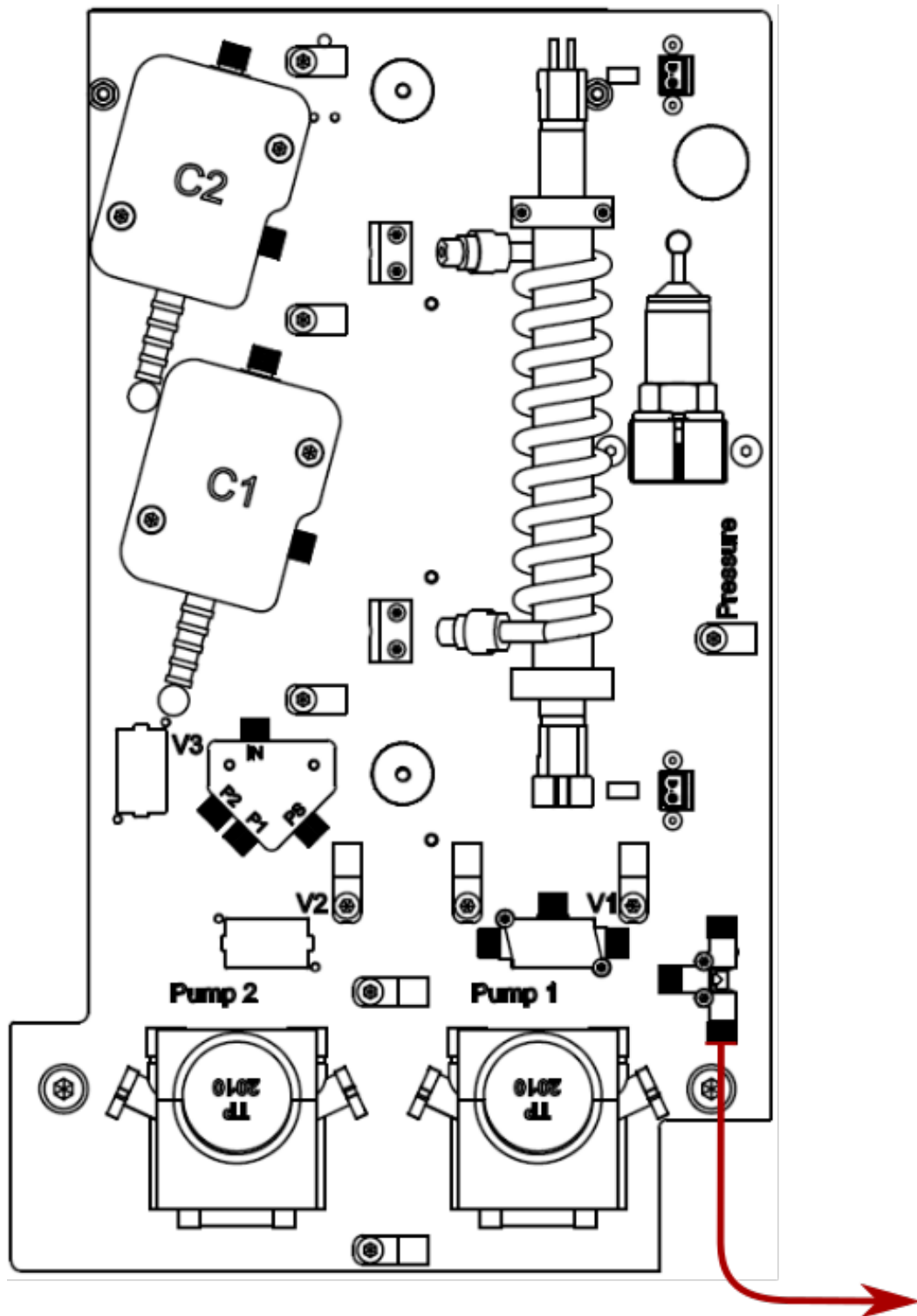

1.0046 T → Waste

Länge: 50 cm